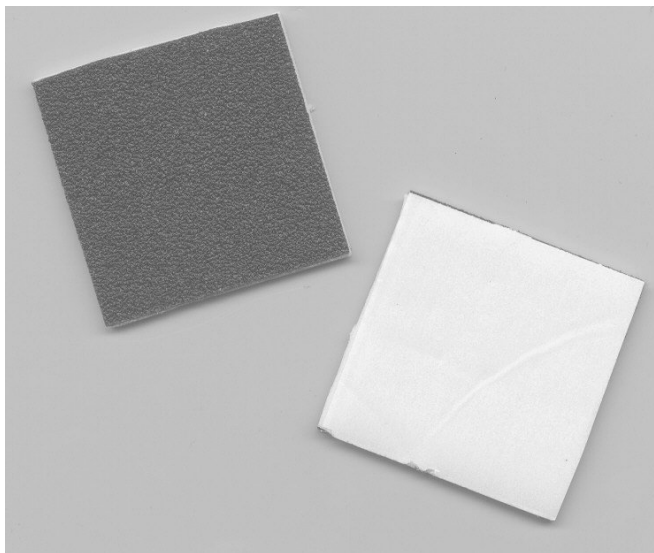


**F7520****SPUGNETTA ABRASIVA MONOUSO STERILE PULISCI ELETTRODI  
DISPOSABLE ABRASIVE TIP CLEANER STERILE PADS**

Le spugnette abrasive FIAB vengono utilizzate durante le procedure elettrochirurgiche per la rimozione di materiale residuo dalla superficie degli elettrodi dei manipoli. La caratteristica principale del F7520 è la superficie abrasiva realizzata con materiale compatto. La radiopacità è garantita dall'inserimento all'interno del supporto di un riferimento plastico con BaSO<sub>4</sub>. L'adesività sul telo operatorio è inoltre assicurata da un adesivo ad alta tenuta. Il prodotto è senza lattice.

*FIAB cleaning pads are used during electrosurgical operations to remove impurities from the surface of electrodes in disposable or reusable pencils. The main feature of F7520 is its abrasive surface. Radiopacity is guaranteed by means of a plastic wire reference with BaSO<sub>4</sub>. High strength adhesive allows a good adherence on the operator sheet. Latex-free*

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

<b>DIMENSIONI DIMENSIONS</b>	50 x 50mm
<b>SUPPORTO ABRASIVO ABRASIVE SUPPORT</b>	Stampato in materiale plastico <i>Plastic material moulded</i>
<b>RADIOPACITÀ RADIOPACITY</b>	Riferimento plastico incorporato con BaSO <sub>4</sub> <i>Plastic wire reference with BaSO<sub>4</sub></i>
<b>MATERIALE INTERNO INTERNAL MATERIAL</b>	Schiumato morbido FOAM
<b>ADESIVO ADHESIVE</b>	Alta tenuta <i>High strength</i>
<b>SPESSORE THICKNESS</b>	4 mm
<b>STERILIZZAZIONE STERILISATION</b>	Ossido di Etilene <i>ETO gas</i>
<b>CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS</b>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe Is <i>Directive 93/42/EEC. Class Is device</i>

**CONFEZIONAMENTO - PACKAGING**

<b>CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING</b>	Singola in busta termosaldada di carta accoppiata con polietilene <i>Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene</i>
<b>CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING</b>	100 pezzi in scatola di cartone <i>100 pcs in carton box</i>
<b>IMMAGAZZINAMENTO STORAGE</b>	Temperatura: 0°C ÷ + 50° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0°C ÷ + 50° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
<b>SCADENZA EXPIRY</b>	36 mesi dalla data di sterilizzazione <i>36 months from sterilisation date</i>

52500400BR4H